

Utilisation du Méopa dans les conditions de pandémie de Covid-19



Votre santé, notre quotidien

Rédigé par l'équipe algologique
du CHA-Vivalia

L'utilisation du MEOPA est bien autorisée chez les patients suspects et patients Covid-19, mais selon des recommandations strictes. Dans le contexte actuel, il est donc important de suivre ces recommandations pour **tous les patients non testés**, puisqu'ils sont a priori suspects Covid-19. Les recommandations des autorités Belges et Françaises concernant l'administration du Méopa préconisent donc des protections supplémentaires en plus des précautions habituelles. Les voici,

Equipement du soignant

Bien que le filtre est bidirectionnel et efficace contre le Covid-19, mais qu'on ne peut exclure d'éventuelles fuites au niveau de l'étanchéité du masque, il est recommandé au soignant de porter pour chaque soin des **gants**, un **masque chirurgical** et une **visière**.



Matériel du kit Méopa


Rappel :

- Le filtre antibactérien ainsi que le masque sont à usage unique ! Il est **strictement recommandé de les jeter** après chaque utilisation.
- L'utilisation du ballon et du raccord en « t » sont utilisés pour **15 fois maximum. Vous devez donc compter les utilisations** (cf feuille de traçabilité ci-jointe)!

Le **ballon** et le **raccord en « t »** doivent être désinfectés après chaque usage (lingettes désinfectantes par exemple).

Le **filtre** doit être placé près du masque.

Désinfection systématique à chaque usage ET Maximum 15 utilisations (puis jeter)

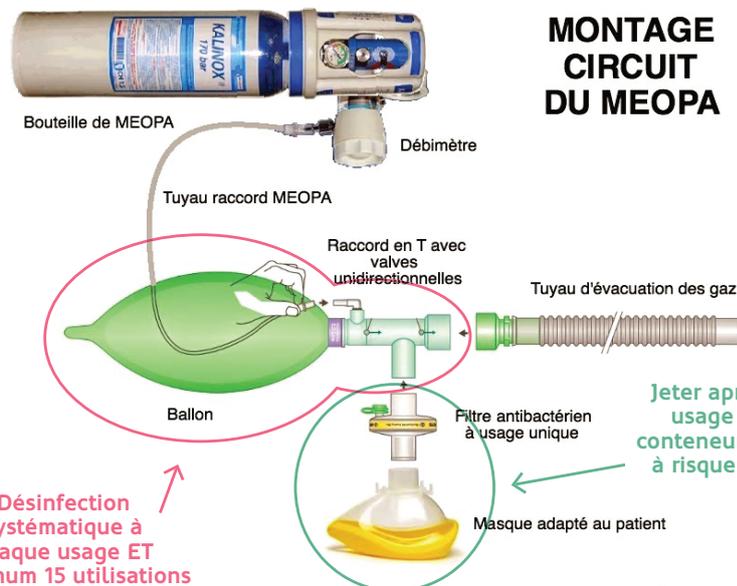

MONTAGE CIRCUIT DU MEOPA

Jeter après chaque usage dans les conteneurs à déchets à risque infectieux

Source : Air Liquide

Dans le cas particulier du système de valve à la demande, **son usage n'est pas recommandé dans le contexte de cette pandémie**. Toutefois, quand on ne peut l'éviter, il devra être obligatoirement utilisé avec un filtre adéquat à usage unique. Le filtre antibactérien 0.22 u est certifié à > 99% comme étant efficace contre le Covid-19 et son efficacité est bidirectionnelle. **Le local doit être aéré après chaque utilisation !**